

RODAN+FIELDS



DEFINE

AMP MDシステム

より引き締まった、なめらかな肌へ

ディファイン AMP MD システムについて

年齢を重ねた肌のために開発されました。古い角質を取り除くAMP MD ダーマローラーと、独自のレチナールMDテクノロジーを取り入れたインテンシブ スムージング セラム。さらに引き締まったなめらかな肌へ導きます。

正しい使い方で、肌は変わります：

- ダーマローラーが、肌の表面とキメを整えます。
- 肌を引き締めて、ハリを与えます。




Product Spotlight

インテンシブ スムージング セラム

よりなめらかな肌へ導く夜用濃縮美容液。高濃度レチナール^{※1}にヒドロキシアパタイト^{※1}を組み合わせた次世代のレチナールMDテクノロジーが、肌荒れを防ぎながら肌のトーン^{※2}やキメを整えます。レチナールMD^{※1}と整肌成分ペプチドの働きで、均一でキメの整った、よりなめらかな印象の肌へ導きます。

※1：整肌成分

※2：保湿効果による

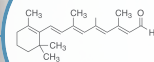



AMP MD ダーマローラー

独自に開発された高精度マイクロニードル付きのローラー。古い角質を取り除き、肌をなめらかに引き締めます。化粧品の浸透性*をよくするために、AMP MD ダーマローラーをご使用ください。

※角質層まで

人間工学にもとづいた独自の設計で、心地よく肌を引き締めます。

ご使用方法

夜の洗顔後、顔や首まわりにご使用ください。最大週3回が目安です。

- ディファインまたはブライトーン スキンケア・プログラムと一緒にお使いください。
- 朝：ご使用方法に従って、ディファインまたはブライトーン スキンケア・プログラムをお使いください。
- 夜：右のご使用方法に従ってください。
- ダーマローラーまたはレチノイド系の製品を初めてお使いになる際は、ダーマローラーは週1回、インテンスプスミージング セラムは週3回の頻度からはじめ、その後様子を見ながら使用回数を増やしてください。

1.落とす



2.整える



3.AMP MD ダーマローラー

- 顔を5つの部位（額、右ほほ、左ほほ、あご、首）に分け、好きな部位から、まずは縦方向に優しく4-10回、その後、下図のように横、斜め、斜め反対と向きを変え、それぞれの方向で4-10回ずつ転がします。1つの部位が終わったら他の部位についても同様にローラーを転がします。
- ローラーを使う時間は1分以内が目安です。目のまわりを避けてお使いください。



4.エッセンス

- プログラム ステップ3のエッセンスを手のひらに1~2プッシュとり、目のまわりを避けて顔全体に伸ばし、軽くパッティングしながら肌になじませます。
- 乾燥肌が気になる場合、ダーマローラーとエッセンスの間にハイドレーション AH セラムを使うと効果的です。



5.セラム

- カプセルの先端をひねってセラムを出します。目のまわりを避けて顔全体と首に均等に伸ばします。洗い流す必要はありません。そのまま続けてプログラム ステップ4の夜用クリームをお使いください。





6.保湿する



ディファインAMP MD システムのお手入れ方法

- ご使用後は毎回、ピュリフィケーション タブレットを用いて、以下の手順でAMP MD ダーマローラーを洗浄してください。
- クレンジング コンテナの白線のところまでぬるま湯を注ぎます。沸騰したお湯は使用しないでください。
- AMP MD ダーマローラーのハンドルを、クレンジング コンテナのふたに取り付けます。時計回りに回すかカチッとロックされます (図1A、1B)。
- お湯の入ったクレンジング コンテナにピュリフィケーション タブレットを1個入れ、すぐにローラーを浸してください。その際、ローラーのヘッドが完全にお湯に浸かっていることを確認してください (図2)。
- 15分ほどそのままにし、ローラーを取り出してお湯で十分にローラーをすすいでください。使用した洗浄液は廃棄してください。洗浄液にローラーを長時間放置しないでください。
- 洗浄後は、ローラーに保護キャップをつけるか、クレンジング コンテナのふたに固定して保管してください。ローラーをテーブルなど硬い表面の上に直接置かないでください。
- 保護キャップを着脱する際は、キャップの横を持ち、指がローラーヘッドに触れないようにしてください。キャップをスライドして着脱する際はご注意ください。キャップ内の溝をガイドとしてお使いいただくと、所定の位置でキャップがカチッと締まります (図3)。
- 目のまわり、傷口、赤み、はれ、痒みのある肌、敏感になっている肌にはローラーを使用しないでください。お子様の手の届かないところに保管してください。

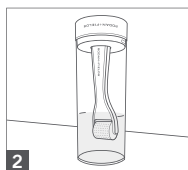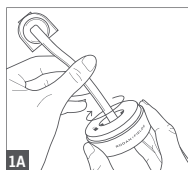

ダーマローラーの取り扱い

AMP MD ダーマローラーには、高精度・高品質なマイクロニードルを使用しています。保管の際は、ローラーに保護キャップをつけるか、クレンジング コンテナのふたに固定してください。ローラーをテーブルなど硬い表面の上に直接置かないでください。

保護キャップを着脱する際は、キャップの横を持ち、指がローラーヘッドに触れないようにしてください。キャップをスライドして着脱する際はご注意ください。キャップ内の溝をガイドとしてお使いいただくと、所定の位置でキャップがカチッと締まります (図3)。

肌への効果を維持するために、9～12か月ごとのローラー交換をおすすめします。